

ミラクルチャート


MC-5/MC-5S



ミラクルチャート

MC-5/MC-5S

液晶搭載でチャートの切替がスムーズ
卓上型省スペース視力表

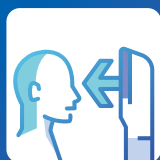

最小設置距離 **40cm**での視機能測定
視力測定エリアの**省スペース化**に
貢献します。



横幅約 **21cm**^{*1}
スリムな**卓上型**液晶チャート
*1 テーブル設置面の最小幅は 18cm




MC-5S


“円偏光” 技術を用いた新しい測定システム

円偏光

MC-5S の偏光フィルター（円偏光）を用いることで、顔を傾けても偏光状態を維持することができるので、プリズム度数測定時も安定した測定を行うことが可能です。^{*2} 偏光を利用した立体視検査も行えます。

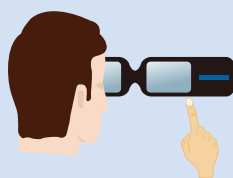

もちろんOK!

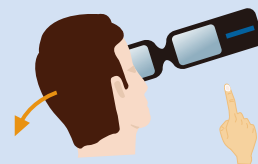

傾けてもOK!

*2 CV-5000PRO 本体の偏光フィルター（円偏光）と付属品の円偏光メガネを MC-5S の偏光フィルター（円偏光）と組み合わせて使用した場合

MC-5



液晶リモートコントローラー

LR-5

液晶リモートコントローラー LR-4 をリニューアル。
アライメントエミッターボタンを本体の中心位置に
搭載し、くびれを作り持ちやすい形状に変更しました。



アライメントエミッターボタン



Point

信号発光部が従来の液晶リモコンより大きくなりました。

視力検査でも ソーシャルディスタンスを確保

タブレット端末を利用すると、
ソーシャルディスタンスを確保した位置から
チャート変更やレンズ変更などの操作が可能です。^{*3}

*3 MC-5 を CV-5000PRO と接続し、タブレット端末をコントローラーとして使用した場合

豊富な見え方体験

CV-5000PROと組み合わせて使用することで、遠用と近用それぞれの見え方体験や運転時のシュミレーションなど、様々な見え方疑似体験が可能です。

遠用・近用見え方体験

様々な日常シーンの見え方を疑似体験できます。KB-50S との組み合わせにより、遠用の静止画像と近用の静止画像の見え方を相互に確認でき、累進レンズ選びをサポートします。



運転時シュミレーション

「高速道路とトンネル走行シーン (2D)」では、案内板の見え方やトンネル走行時のサングラスの濃度説明が行えます。「一般走行シーン (3D)」では、新しい処方状態での立体的な見え方が疑似体験できます。



WMV ファイル
に対応

深視力テスト

トプコンオリジナルの「アクティブ視標」を搭載。大型 2 種免許試験の深視力テストを疑似体験でき、結果判定まで行えます。




深視力 (三棒検査)
中央の棒が前後に移動

コントラストモード

コントラストモードは「単比率」「複比率」の 2 種類を搭載し、ひらがな、ランドルト環に利用できます。白黒反転機能も搭載し、コントラスト感を向上させる機能レンズの説明に役立てることができます。



コントラストの変更

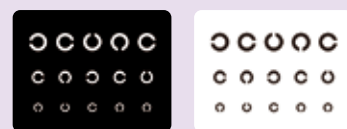

白黒反転機能

MC-5Sの本体部 CV-5000PROとその付属品



コンビジョン

CV-5000PRO



1ダイヤルコントローラー

KB-50S

MC-5の付属品



液晶リモートコントローラー

LR-5

市販品



LCD+マウス

仕様

設置可能距離	MC-5 : 40cm、65cm、85cm、100cm、105cm MC-5S : 40cm*、60cm、80cm、95cm、110cm	*D3タイプのみ
視力値	0.03 ~ 2.0	
視標	ひらがな、ランドルト標、R&G、クロスシリンダー、両眼バランス等	
寸法	450mm(W)、207mm(D)、621mm(H)	
質量	MC-5 : 13.6kg、MC-5S : 13.1kg	
電氣的定格	電源電圧 : 交流 100V-240V、周波数 : 50-60Hz、電源入力 : 1.5A	

設置例




CS-50Sの上に載せた場合




台の上に載せた場合

*CS-50SとタブレットPC、台は「コンビジョン CV-5000」及び「ミラクルチャート MC-5」には含まれません。

チャート一覧(D3)

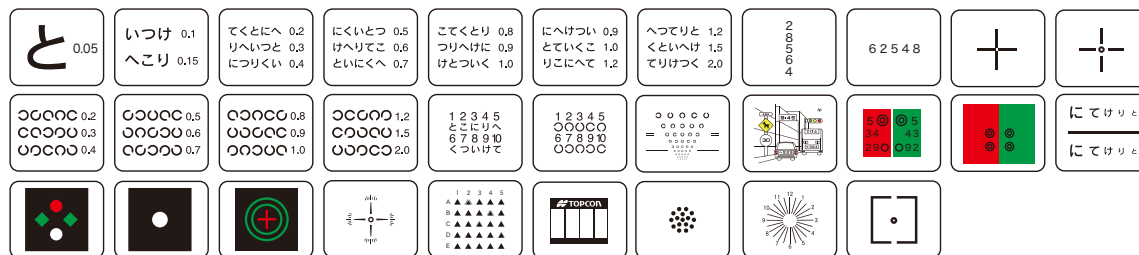

チャート一覧(D6)

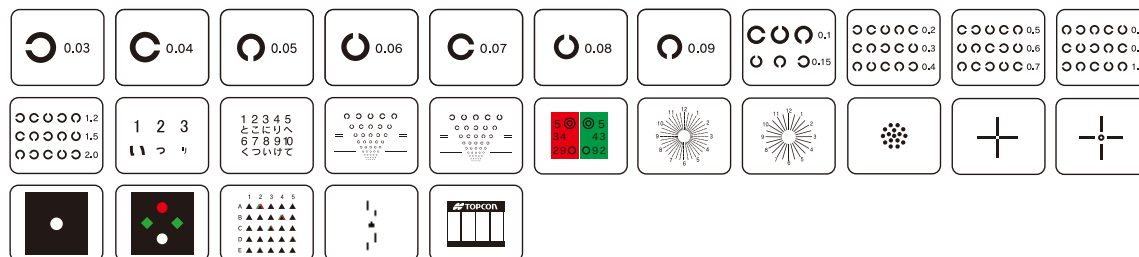

販売名 : ミラクルチャート MC-5 医療機器届出番号 : 13B1X00030000MC5

販売名 : コンビジョン CV-5000 医療機器届出番号 : 13B1X00030CV5000

※ MC-5S は CV-5000 の付属品です。

※画面はハメコミ合成です。

※カタログと実際の商品の色とは、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

※カタログ掲載商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

株式会社 トプコン・エシロールジャパン

営業部 〒174-0052 東京都板橋区蓮沼町 75-1 TEL:03(3558)2514 FAX : 03(3558)2905

営業所 札幌 仙台 東京 名古屋 大阪 福岡

機器に関するご質問・ご相談は下記にご用命下さい。

トプコン・エシロールジャパン眼鏡器械コールセンター TEL.03(5914)6193



株式会社トプコン



株式会社トプコン

製造販売 株式会社 トプコン ホームページ <https://www.topcon.co.jp>

本社アイケア事業管理部営業課 〒174-0052 東京都板橋区蓮沼町 75-1

©株式会社 トプコン

MO00129J-2