

ミラクルチャート

# MC-5/MC-5S



ミラクルチャート

# MC-5/MC-5S

液晶搭載で視標の切替がスムーズ  
卓上型省スペース視力表



選べる設置距離

視力検査エリアの**省スペース化**に  
貢献します。




奥行約 **21 cm**<sup>\*1</sup>

スリムな**卓上型**液晶チャート

\*1 テーブル設置面の最小幅は 18cm



## スムーズな視標切替で視力検査をサポート

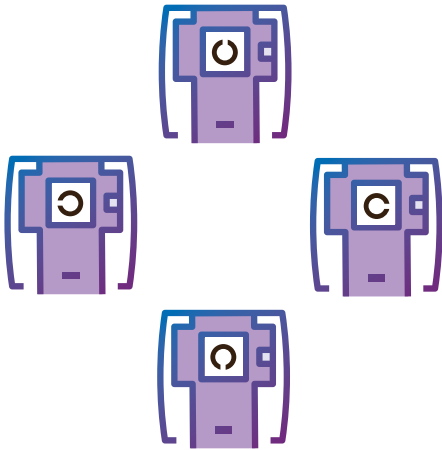

0.03 ~ 2.0 まで、ランドルト環視標の向きをリモコンでスムーズに変更できます。大きな視標でも切れ目の向きを記憶される心配がありません。字ひとつ・字づまり視標への切替や小児視標への切替も簡単で、偏光レンズを使用した、擬似的な三桿計テストも行なえます<sup>\*2</sup>。

\*2 MC-5 のみ。ランドルト環視標の向きは8方向表示へ設定も可能です。

### MC-5



液晶リモートコントローラー

### LR-5

目高位置を調整するアライメントエミッターボタンを本体の中心位置に搭載。前面の信号発光部を被験者の目の高さに合わせて視標の表示位置を調整できます。



アライメントエミッターボタン



Point

信号発光部が従来の液晶リモコンより大きくなりました。

## 視力検査でも ソーシャルディスタンスを確保

タブレット端末が利用できるため、  
ソーシャルディスタンスを確保した位置から  
チャート変更やレンズ変更などの操作が可能です。<sup>\*3</sup>


\*3 MC-5をCV-5000PROと接続し、タブレット端末をコントローラーとして使用した場合

## 選べる設置距離 省スペース型の液晶視力表

5mの距離を必要とせず、検査室のレイアウトに合わせた設置距離が選択可能です。

設置場所を選ばないコンパクトな視力表で、検査エリアの省スペース化が図れます。

別売品の検眼用テーブルを利用することで車いすのままでも検査が可能です。

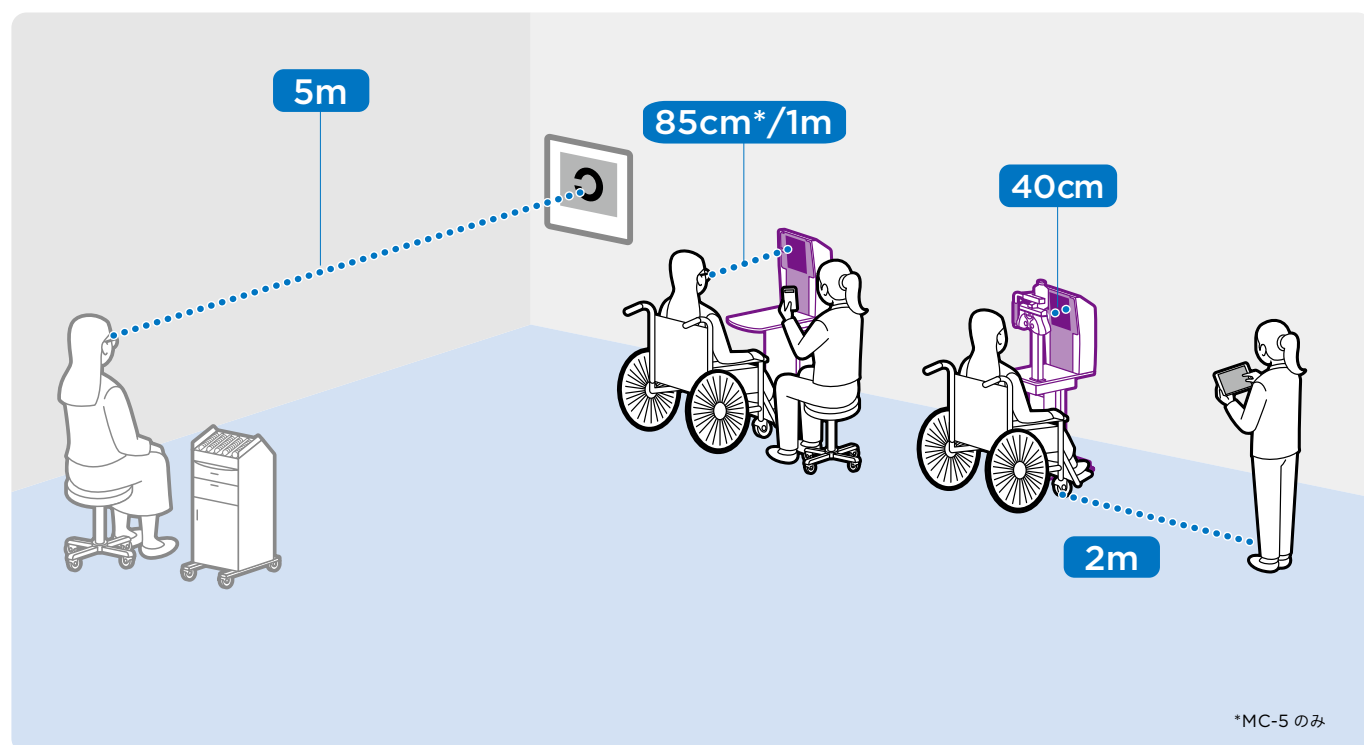

## MC-5の付属品



液晶リモートコントローラー  
**LR-5**

## MC-5Sの本体部 CV-5000PROとその付属品



コンピジジョン  
**CV-5000PRO**



1ダイヤルコントローラー  
**KB-50S**

## 設置例



車いす対応検眼テーブル\*の  
上に載せた場合



台\*の上に載せた場合




CS-50S\*の上に載せた場合  
\*本品には含まれない別売品

## 仕様

設置可能距離	MC-5 : 40cm、65cm、85cm、100cm、105cm MC-5S : 40cm*、60cm、80cm、95cm、110cm	*D3タイプのみ
視力値	0.03 ~ 2.0	
視標	ひらがな、ランドルト環、数字、R&G、クロスシリンダー、両眼バランス、三桿計等	
寸法	450mm (W)、207mm (D)、621mm (H)	
質量	MC-5 : 13.6kg、MC-5S : 13.1kg	
電氣的定格	電源電圧 : 交流 100V-240V、周波数 : 50-60Hz、電源入力 : 1.5A	

## チャート一覧

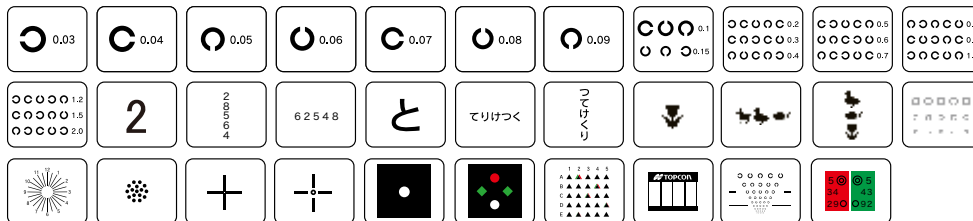

販売名 : ミラクルチャート MC-5 医療機器届出番号 : 13B1X00030000MC5  
販売名 : コンピジジョン CV-5000 医療機器届出番号 : 13B1X00030CV5000  
※ MC-5S は CV-5000 の付属品です。

お問い合わせ



\*画面はハメコミ合成です。  
\*カタログと実際の商品の色とは、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。  
\*カタログ掲載商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

**注意** 正しく安全にお使い頂くため、  
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

## 株式会社トプコンメディカルジャパン

ホームページ: [topconhealthcare.co.jp](http://topconhealthcare.co.jp)

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL.(03)5915-1800 FAX.(03)5915-1805  
 カスタマーサポート部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL.(03)5915-1621 FAX.(03)5915-1805  
 サービス部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL.(03)5915-1621  
 札幌営業所 〒064-0807 北海道札幌市中央区南7条西1-21-1第3弘安ビル6F TEL.(011)520-2150 FAX.(011)520-2151  
 仙台営業所 〒980-0804 仙台市青葉区大町1-3-2仙台MDビル2階 TEL.(022)722-0637 FAX.(022)722-0638  
 首都圏営業部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL.(03)6867-0123 FAX.(03)6867-0124  
 関東広域営業 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL.(03)6867-0123 FAX.(03)6867-0124  
 横浜事務所 〒224-0032 横浜市中区新港1-3ケルネスセンタープラザ南ビル101号室 TEL.(045)949-3600 FAX.(045)949-3604  
 名古屋営業所 〒461-0005 名古屋市中区東2-9-1高岳セントラルビルディング2階 TEL.(052)934-0761 FAX.(052)934-0762  
 大阪営業所 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-5-15進徳第六ビル2階 TEL.(06)7659-2904 FAX.(06)7659-2906  
 広島営業所 〒733-0013 広島市西区横川新町8-22(ランドマーク横川) TEL.(082)294-8971 FAX.(082)294-8994  
 松山営業所 〒791-1105 松山市北井門2-12-7(エシャンジュル松山103) TEL.(089)969-1427 FAX.(089)969-1428  
 福岡営業所 〒812-0042 福岡市博多区豊1丁目10-50MR博多ビル TEL.(092)483-3751 FAX.(092)483-3753



株式会社トプコン



製造販売 **株式会社トプコン**

本社・アイケア事業本部  
〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL.(03)3558-2506  
<https://topconhealthcare.jp/ja/>

**TOPCON Healthcare**

M00135J-2