

オートケラトレフラクトメータ

オートレフラクトメータ

KR-800

RM-800



オートケラトレフラクトメータ

KR-800

オートレフラクトメータ

RM-800

8.5 インチのワイドなコントロールパネルを搭載。クリアな画面表示でスムーズな測定ができます。さらにトプコン独自のロータリープリズム測定方式により、瞳孔径の小さな眼でも測定可能です。



特長



オートケラト¹
レフラクトメータ



ロータリープリズム
測定方式



かんたん操作



ワイドでクリアな
8.5 インチコントロールパネル




省スペースデザイン



測定データの
転送もスムーズ

ロータリープリズム測定方式

網膜上に投影する測定リングを偏心回転させ測定を行います。最小瞳孔径φ 2mm（屈折測定時）で瞳孔径の小さな眼でも測定可能です。

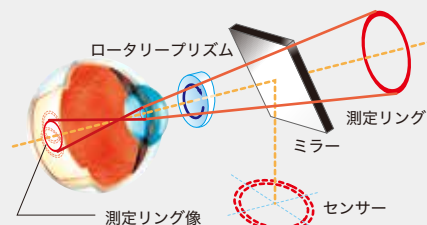

ワイドでクリアな 8.5 インチ コントロールパネル

8.5 インチのワイドなコントロールパネルを搭載しました。クリアな画面表示で、必要なボタンは画面上のアイコンで表示され、モード切り替え等の操作はアイコンをタップして選択します。検者は画面から視線を外すことなくスムーズな測定ができます。



ワンタッチ架台ストッパー & 使い勝手のよいプリンター

本体の動きをワンタッチで簡単にロック・解除できる架台ストッパーを搭載しています。

またプリンタ用紙はホルダーに入れるだけで簡単にセットできます。



プリントサンプル

1. 検者 ID
2. 屈折測定結果（右）
3. 屈折測定結果（左）
4. 角膜曲率測定結果¹（右）
5. 角膜曲率測定結果¹（左）

1	OID NAME 2013_01_20 AM 10:37 NO. 0018 SN : 0987000
2	REF. DATA VD : 12.00 CYL: (-) (R) S C A - 0.50 - 1.25 79 - 0.50 - 1.25 78 - 0.50 - 1.25 78 - 0.50 - 1.25 78 S.E. - 1.00
3	(L) S C A - 1.50 - 0.50 133 - 1.50 - 0.50 133 - 1.50 - 0.50 133 - 1.50 - 0.50 133 S.E. - 1.75
	PD: 67.5
4	KRT DATA (R) D MM A H 42.50 7.96 176 V 42.00 8.01 86 AVE 42.25 7.99 CYL: -0.50 86
5	(L) D MM A H 42.25 8.00 169 V 42.75 7.89 79 AVE 42.50 7.95 CYL: -0.50 169
	TOPCON

仕 様

KR-800

RM-800

屈折測定範囲	球面屈折力	-25 ～ + 22D (0.12D/0.25D ステップ表示) *	
	円柱屈折力	0 ～ ±10D (0.12D/0.25D ステップ表示) *	
	乱視軸方向	0 ～ 180° (1° / 5° ステップ表示)	
角膜曲率測定範囲	角膜曲率半径	5.00 ～ 10.00mm (0.01mm ステップ表示)	-
	角膜屈折力	67.50 ～ 33.75D (0.12D/0.25D ステップ表示) (但し、角膜屈折率 = 1.3375 とした時の換算値)	
	角膜乱視度	0 ～ ±10D (0.12D/0.25D ステップ表示)	
	角膜乱視軸方向	0 ～ 180° (1° / 5° ステップ表示)	
測定最小瞳孔径		φ 2mm	
PD 測定範囲		20mm ～ 85mm (0.5mm ステップ表示)	
外部接続端子		USB(入力用) / RS-232C(出力用) / LAN (出力用)	
電源・電圧		交流 100V、100-240V	
電源入力		交流 100V の場合 30-45VA、 交流 100-240V の場合 30-65VA	交流 100V の場合 30-45VA、 交流 100-240V の場合 30-70VA
寸法		317 - 341mm(W) × 521 - 538mm(D) × 447 - 477mm(H)	
質量		15kg	

* 但し、球面屈折力 + 円柱屈折力 ≤ +22D、または球面屈折力 + 円柱屈折力 ≥ -25D

販売名：オートケラトレフラクトメータ KR-800
医療機器届出番号：13B1X000300KR800
販売名：オートレフラクトメータ RM-800
医療機器届出番号：13B1X000300RM800
※画面はハメコミ合成です。
※カタログと実際の商品の色とは、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
※カタログ掲載商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 **トプコン・エシロールジャパン**

営業部 〒174-0052 東京都板橋区蓮沼町 75-1
TEL. 03(3558)2514 FAX. 03(3558)2905

営業所 札幌 仙台 東京 名古屋 大阪 福岡

機器に関するご質問・ご相談は下記までご用命下さい。

トプコン眼鏡器械コールセンター

TEL. 03(5914)6193 受付時間 9:30 ～ 18:00 (月曜日～土曜日)
※年末年始・システム点検日を除く



株式会社トプコン



株式会社トプコン

製造販売 **株式会社トプコン**

本社・アイケア事業本部
〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町 75-1 TEL. (03)3558-2506
<https://topconhealthcare.jp/ja/>

TOPCON Healthcare

©株式会社トプコン M000250J-3